

ショッピングカート
〈4輪タイプ〉

品名 ステッキカート
(バッグタイプ大)

品名 ステッキカート
(バッグタイプ小)

品番 DW01

品番 DW02

取扱説明書

歩行姿勢を支え保持する商品ですが、使用時は脇をしめ本体が身体から離れないように4輪で押して使用してください。身体を支えることができる設計にしておりますが、決して過信せずにならず自己責任においてご使用ください。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。



目次

ご使用前の注意	1 P
ご使用上の注意	1～2 P
お手入れ方法	3 P
保管方法	3 P
各部の名称と製品仕様	4 P
持ち手高さの調節方法	5 P
袋の取りはずし方	6 P
レインカバーの取り付け方	7 P
鍵の取り付け方	7 P

製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。

福祉用具総合メーカー

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)

0120-508-058

フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

<http://www.tacaof.co.jp>

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。

ご使用前の注意

！ 注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 組み立てるときは周囲に人がいないことを確認してください。
- 組み立て、折りたたみおよび袋の取り付けは確実に行ってください。また指などをはさまないように注意してください。
- 使用前に各部を点検してください。
- 各部の留め金具（カシメ鉚・ネジ・ナットなど）がゆるんでいないことを確認してください。
- 持ち手が固定されていることを確認してください。固定されていないと、使用中に高さが変わることがあり危険です。

以下の方はご使用にならないでください。

！ 警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 杖なしでは歩行できない方。（手すりにつかまらなければ歩行できない方や、介助者がいなければ歩行できない方。）
- リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。

ご使用上の注意

！ 警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 持ち手に荷物を吊りさげないでください。バランスを崩し危険です。



注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 溝や段差のあるところでは十分注意してください。転倒などのおそれがあります。
- 段差のあるところで荷物を入れたまま引くと、車輪、フレームなどが破損するおそれがありますので十分注意してください。
- 袋内に15kg以上の重さの荷物を入れて使用しないでください。
- シルバーカー・イス・踏み台・人を乗せるなど、ショッピングカート以外の用途には使用しないでください。
- 分解・修理は弊社のサービス員以外、行わないでください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- 身体を支える際、持ち手に対し垂直に体重がかかるように使用してください。斜めから体重をかけると転倒などのおそれがあります。
- 勢いよく持ち手部分に負荷をかけないでください。過度な荷重がかかり変形、破損、転倒のおそれがあります。
- 最大使用者体重をかならず守ってください。
- 坂道など、平坦ではない場所で体を支えないでください。転倒のおそれがあります。
- 路面の状態によっては、転倒のおそれがあります。十分に注意してください。
- 立ち座りの際、手すりかわりに使用しないでください。
- 飛行機内への持ち込みは、航空会社の指示に従ってください。
- ナイフ等鋭利なものは中に入れないでください。
- この商品は4輪走行で押し歩くことを前提としています。使用状況によっては2輪走行でも問題ありませんが、車輪の片減りや荷台フレームの破損を防ぐため、できる限り4輪での走行をおすすめいたします。段差や急斜面の移動には十分にご注意ください。

お手入れ方法

- 雨などで濡れたときは乾いた布で拭き取ってください。泥やほこりがついたときは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
- 袋の汚れは、水につけた布を固くしぼって拭き、そのあとよく乾かしてください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。


保管方法

- 屋内で保管してください。また、長期間使用しないときは、汚れを落としてから保管してください。
- 雨ざらしになる場所、また高温多湿な場所では保管しないでください。故障や変形の原因となります。

製品の破損や異常を発見した場合は直ちに使用を中止し、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険があります。

※本製品を他の方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡しください。

各部の名称と製品仕様

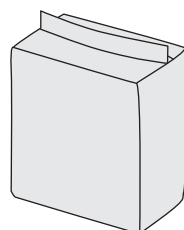


※図はDW01です。

品番	DW01		
組み立て寸法	幅315×奥行216×高さ780～900mm		
持ち手高さ	高さ780～900mm（4ポジション）		
折りたたみ寸法	幅315×奥行216×高さ550mm		
本体材質	アルミ	車輪材質	エラストマー
袋寸法	幅290×奥行200×高さ400mm		
重量	2.3kg	袋材質	ナイロン
最大使用者体重	80kg	最大持ち手耐荷重	40kg


品番	DW02		
組み立て寸法	幅315×奥行216×高さ690～850mm		
持ち手高さ	高さ690～850mm（5ポジション）		
折りたたみ寸法	幅315×奥行216×高さ450mm		
本体材質	アルミ	車輪材質	エラストマー
袋寸法	幅290×奥行200×高さ300mm		
重量	2.1kg	袋材質	ナイロン
最大使用者体重	80kg	最大持ち手耐荷重	40kg

※折りたたみ寸法は参考数値です。


持ち手高さの調節方法

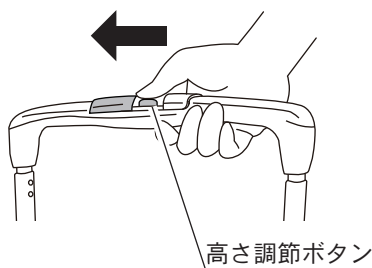

持ち手上部のカバーを横にスライドさせてください。

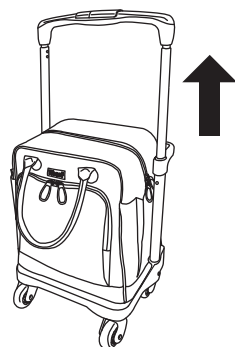

高さ調節ボタンを押しながらカチッと音が鳴るまで最上部に引きあげてください。

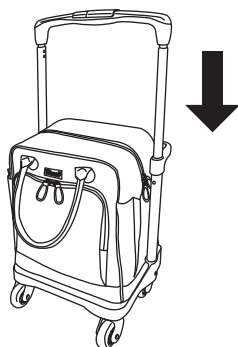


ボタンを押しながら持ち手をさげ、好みの高さでボタンをはなし持ち手が固定されたことを確認してください。

！ 注意


- 持ち手をさげるときは、体重をかけないでください。バランスをくずし、転倒するおそれがあります。
- 持ち手が固定されていることを確認してから使用してください。
- かならず持ち手を最上部まで引き上げてから高さ調節をしてください。
- 指などをはさまないように注意してください。

袋の取りはずし方


※袋ははずして使用できます。

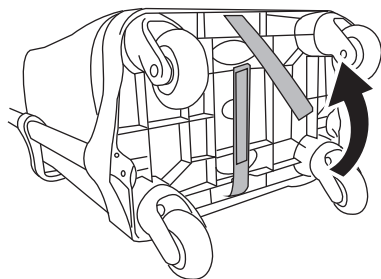


袋下部にある面ファスナーを取りはずしてください。

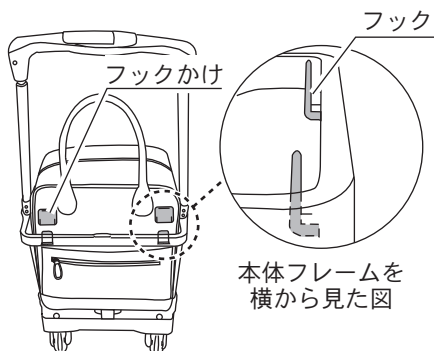

袋背面にあるフックかけを本体フレームのフックから取りはずしてください。

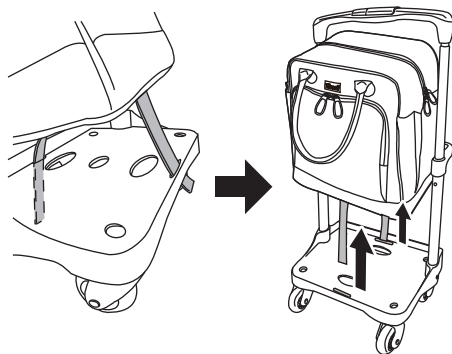

袋下部にあるベルトを取りはずしてください。

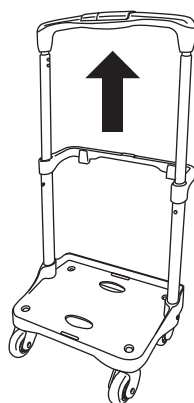


袋の取り付けは持ち手をあげた状態で行ってください。取付けの際は逆の手順で取り付けてください。


⚠ 注意

- 袋が確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

レインカバーの取り付け方

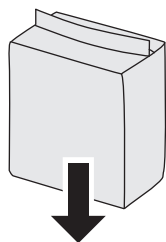

レインカバーを
上から見た図

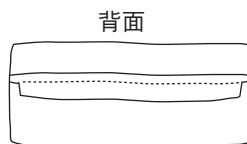

背面


前面

※取り付ける際は前後の向きを確認してください。



レインカバー上部の穴に持ち手を通して袋にかぶせてください。

鍵の取り付け方

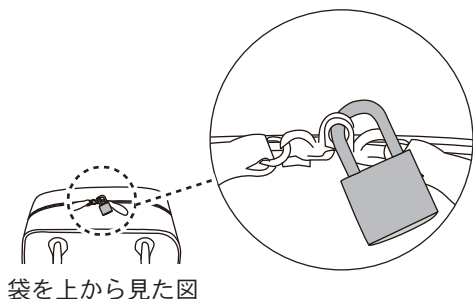

袋を上から見た図

袋が閉まっていることを確認し、ファスナー金具に付属の鍵を取り付けてください。

！注意

- 付属の鍵は簡易型の鍵となりますので、貴重品の取りあつかいには十分ご注意ください。
- 上図のファスナー以外の箇所には鍵を取り付けないでください。

TAKE CARE OF
Tacaof
<http://www.tacaof.co.jp>